




Дезинфицирующие и моющие средства

Каталог продукции



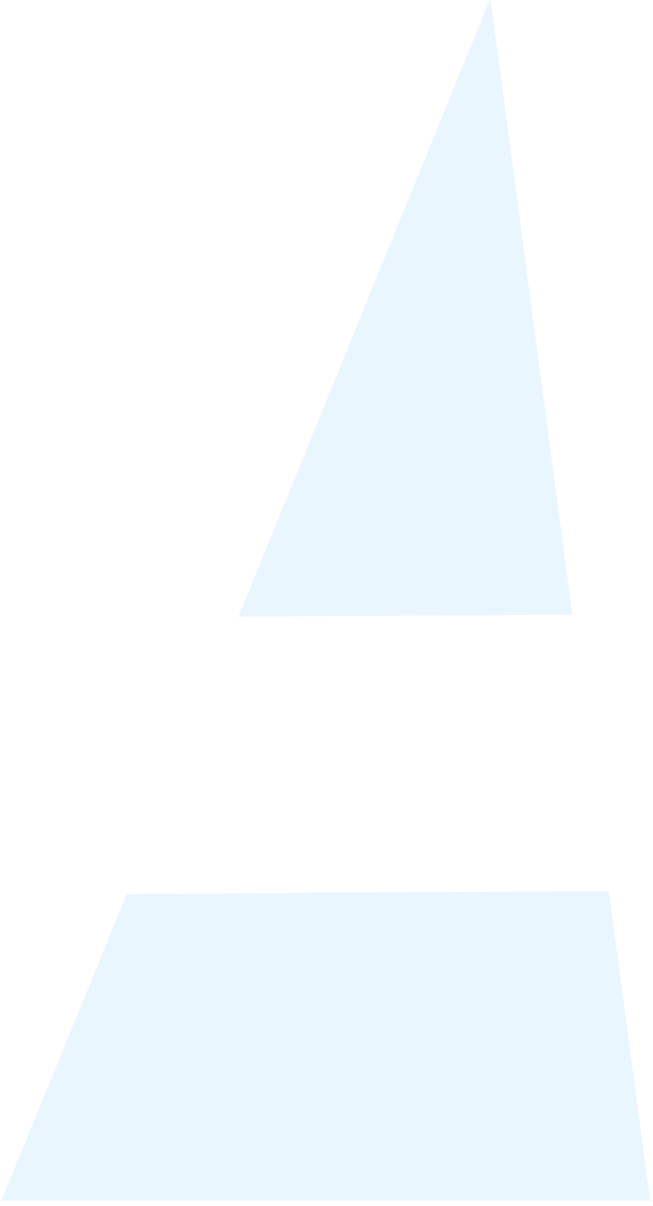

Содержание

Преимущества продукции Абактерил	2
О компании.	3
Концентрированные дезинфицирующие средства	4
Хлорсодержащие средства	10
Антисептики и дезинфицирующие салфетки.	12
Готовые к применению средства	23
Средства по уходу за кожей	30
Дозаторы и держатели	34
Сопутствующие товары	37

Преимущества продукции АБАКТЕРИЛ

АБАКТЕРИЛ

1 Высокая дезинфицирующая активность и отсутствие резистентности микроорганизмов: многокомпонентный, оптимальный состав, сбалансированная рецептура и тщательно проверенные режимы санации.

2 Безопасность: низкая токсичность средств, возможность использования в присутствии человека, в том числе в детских учреждениях и роддомах.

3 Экономичность: импортозамещение компонентов, доступная стоимость, высокая концентрация действующих веществ, различные формы выпуска.

4 Универсальность: применение на любых объектах и при всех видах дезинфекции как в профессиональной, так и в бытовой сферах.

5 Многофункциональность: синергия очистки и дезинфекции, отличные моющие, обезжиривающие и дезодорирующие свойства.

6 Удобство хранения и транспортировки: концентрированная форма, эргономичная упаковка, длительные сроки хранения и отсутствие специальных требований хранения, перевозки и утилизации.

7 Качество: бережное воздействие на обрабатываемые поверхности без обесцвечивания и коррозии.

8 Экологичность: использование биоразлагаемых и безопасных для окружающей среды составов.

9 Оптимизация трудозатрат: средства многофункциональны, обладают пролонгированным действием и не требуют смывания.

10 Соответствие стандартам: все средства соответствуют требованиям ГОСТ и СанПиН.

О компании

ООО «Рудез» — российская производственная компания, которая более 15 лет выпускает под торговой маркой «Абактерил» высококачественные средства для профессиональной и бытовой дезинфекции, а также ухода за кожей. В своей работе мы используем опыт ведущих мировых производителей, последние научные достижения в сфере санитарии и сырье ведущих химических концернов.

Производство, научно-исследовательская лаборатория, склад и логистический центр расположены в Московской области, откуда продукция компании поставляется во все регионы России, страны СНГ и Евразийского экономического союза.

Современное высокотехнологичное оборудование дает возможность производить большие объемы продукции в оптимальные сроки. Тщательный контроль используемого сырья, готовой продукции и тары позволяет выпускать товар высокого и стабильного качества.



Исследовательская лаборатория непрерывно занимается разработкой новых составов и систем дозирования средств, в том числе выполняя сложные задачи, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

Благодаря отлаженным производственным процессам и грамотно выстроенной логистике, мы имеем возможность предлагать торговым партнерам самые конкурентные цены. Наши специалисты предоставляют профессиональные консультации по вопросам выбора и применения продукции в режиме реального времени.

Продукция Абактерил® разработана с учётом особенностей российского рынка, соответствует ГОСТам и новейшим требованиям СанПиН. Мы обеспечиваем комплексное решение проблем санитарии и гигиены в учреждениях различного профиля и в быту.

Наши средства высокоэффективны, экономичны в использовании и представляют особый интерес для тех, кто стремится сократить время, трудозатраты и финансовые издержки без ущерба для качества. Вся продукция имеет необходимые сертификаты, а также ведомственные заключения и подробные инструкции по применению.

А

Безопасность начинается
с АБАКТЕРИЛ®

Концентрированные дезинфицирующие средства

АБАКТЕРИЛ-КЛИНЕР

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом.
Действующие вещества: ЧАС, додецилдипропилен триамина.

АБАКТЕРИЛ-ФОРТЕ

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации.
Действующие вещества: глутаровый альдегид, ЧАС, молочная кислота.

АБАКТЕРИЛ концентрат

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом.
Действующие вещества: ЧАС, ПГМГ-гх, додецилдипропилен триамина.

БАКТЕРИДЕЗ

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом.
Действующие вещества: ЧАС, ПГМГ-гх, додецилдипропилен триамина.



АБАКТЕРИЛ

АБАКТЕРИЛ-ОКСИ

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации.

Действующие вещества: перекись водорода, ЧАС, ПГМГ-гх.

АБАКТЕРИЛ концентрат

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

Действующие вещества: ЧАС – 6%, ПГМГ-гх – 1,4%, додецилдипропилен триамина – 1,6%.

Форма выпуска: 1 л; 3 л; 5 л.

pH 1% раствора при 20°C – 8,4

Условия хранения: при температуре от -30 до +35°C

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 35 суток.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, анаэробной инфекции, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, паразитов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| поверхности | кондиционеры | посуда | все виды отходов |
| медицинские изделия | сантехника | одежда и обувь | системы мусороудаления |
| приборы и оборудование | уборочный материал | парикмахерские инструменты | дезинвазия почвы |
| транспорт | обувь и коврики | пропитка салфеток | борьба с плесенью |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, спорта и отдыха
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в воинских частях и соединениях
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пролонгированное антимикробное действие;
- не требует ротации;
- применяется в присутствии людей и животных, не требует смывания;
- моющие, обезжиривающие, дезодорирующие свойства;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.

Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов: 100 шт./уп.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-клинер

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

Действующие вещества: ЧАС – 4%, додецилдипропилен триамина – 0,5%.

Форма выпуска: 1 л; 5 л.

pH 1% раствора при 20°C – 9,5

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°C

Срок годности: 6 лет.

Срок годности рабочего раствора: 40 суток.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, анаэробной инфекции, эшерихиоза, легионеллеза, сальмонеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| поверхности | кондиционеры | посуда | все виды отходов |
| медицинские изделия | сантехника | одежда и обувь | системы мусороудаления |
| приборы и оборудование | уборочный материал | парикмахерские инструменты | скорлупа яиц |
| транспорт | обувь и коврики | пропитка салфеток | борьба с плесенью |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, спорта и отдыха
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в воинских частях и соединениях
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пролонгированное антимикробное действие;
- не требует ротации;
- применяется в присутствии людей и животных, не требует смывания;
- моющие, обезжиривающие, дезодорирующие свойства;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- эффективен против биопленок;
- не обладает фиксирующим действием.



abakteril.ru

Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов: 100 шт./уп.

БАКТЕРИДЕЗ

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

Действующие вещества: ЧАС – 8%, ПГМГ-гх – 1,4%, додецилдипропилен триамина – 3,0%.

Форма выпуска: 1 л; 5 л.

pH 1% раствора при 20°C – 8,4

Условия хранения: при температуре от -30 до +35°C

Срок годности: 6 лет.

Срок годности рабочего раствора: 45 суток.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, анаэробной инфекции, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| поверхности | кондиционеры | посуда | все виды отходов |
| медицинские изделия | сантехника | одежда и обувь | системы мусороудаления |
| приборы и оборудование | уборочный материал | парикмахерские инструменты | скорлупа яиц |
| транспорт | обувь и коврики | пропитка салфеток | борьба с плесенью |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, спорта и отдыха
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в воинских частях и соединениях
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пролонгированное антимикробное действие;
- не требует ротации;
- применяется в присутствии людей и животных, не требует смывания;
- моющие, обезжиривающие, дезодорирующие свойства;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов: 100 шт./уп.

АБАКТЕРИЛ-форте

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации.

Действующие вещества: глutarовый альдегид – 8%; ЧАС – 15,0%, молочная кислота – 1,0%.

Форма выпуска: 1 л; 5 л.

pH 1% раствора при 20°C – 3,5

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°C

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 30 суток.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, анаэробной инфекции, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, спор бактерий.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:



эндоскопы и УЗ датчики



медицинские изделия



сантехника



все виды отходов



хирургические инструменты



приборы и оборудование



посуда



уборочный инвентарь



стоматологические инструменты



поверхности



одежда и обувь



системы мусороудаления



парикмахерские инструменты



транспорт



кондиционеры

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, спорта и отдыха
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в воинских частях и соединениях
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- не требует ротации;
- применяется в присутствии людей и животных, не требует смывания;
- моющие, обезжиривающие, дезодорирующие свойства;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- раствор подходит для пропитывания сухих салфеток.



abakteril.ru

Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов: 100 шт./уп.

АБАКТЕРИЛ-окси

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации.

Действующие вещества: перекись водорода – 18%; ЧАС – 5,0%, ПГМГ-гх – 4,0%.

Форма выпуска: 1 л; 5 л.

pH 1% раствора при 20°C – 5,5

Условия хранения: при температуре от -40 до +35°C

Срок годности: 3 года.

Срок годности рабочего раствора: 28 суток.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, анаэробной инфекции, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, спор бактерий.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:



эндоскопы и УЗ датчики



медицинские изделия



сантехника



все виды отходов



хирургические инструменты



приборы и оборудование



посуда



уборочный инвентарь



стоматологические инструменты



поверхности



одежда и обувь



системы мусороудаления



парикмахерские инструменты



транспорт



скорлупа яиц

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, спорта и отдыха
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в воинских частях и соединениях
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- обладает окисляющим действием;
- не требует ротации;
- применяется в присутствии людей и животных, не требует смывания;
- моющие, обезжиривающие, дезодорирующие свойства;
- не портит большинство обрабатываемых объектов;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- не обладает фиксирующим действием;
- раствор подходит для пропитывания сухих салфеток.



abakteril.ru

Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов: 100 шт./уп.

Хлорсодержащие средства

АБАКТЕРИЛ-ХЛОР

Таблетки быстрорастворимые дезинфицирующие и быстрорастворимые хлорные гранулы.

Действующие вещества: Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 2-водной.



АБАКТЕРИЛ

АБАКТЕРИЛ-хлор

Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки и гранулы.

Действующие вещества: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 2-водной.

Форма выпуска: банка 500 г, банка 1 кг.

Условия хранения: при температуре от -30 до +35°C

Срок годности: 6 лет.

Срок годности рабочего раствора: 20 суток.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных и зоонозных инфекций, анаэробной инфекции, эшерихиоза, легионеллеза, протозоозов, спор бацилл, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, паразитов, цист и ооцист простейших.

ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| поверхности | посуда | дезковрики и дезбарьеры | все виды отходов |
| медицинские изделия | вентиляция и водоснабжение | фрукты, овощи, зелень | системы мусороудаления |
| приборы и оборудование | сантехника | скорлупа яиц | дезинвазия почвы |
| транспорт | парикмахерские инструменты | емкости для хранения воды | борьба с плесенью |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в диагностических лабораториях, СПК
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в учреждениях образования, культуры, спорта и отдыха
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + в учреждениях соцобеспечения, пенитенциарной системы
- + на всех объектах транспортной системы
- + в детских учреждениях
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- масса активного хлора в 1 таблетке (3,4 г) - 1,5 г;
- удобная форма выпуска обеспечивает точность дозировки;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.

Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов: 100 шт./уп.



abakteril.ru

Антисептики и дезинфицирующие салфетки

АБАКТЕРИЛ-актив + Салфетки АБАКТЕРИЛ-актив + АБАКТЕРИЛ-актив окрашенный

Кожный антисептик.
Дезинфицирующее средство
готовое к применению.

Действующие вещества: ЧАС,
ПГМГ-гх, изопропиловый спирт.

АБАКТЕРИЛ-гель

Кожный антисептик.
Дезинфицирующее средство
готовое к применению.

Действующие вещества: триклозан,
2-феноксиэтанол, изопропиловый
спирт.

АБАКТЕРИЛ-ИПС-75

Кожный антисептик.
Дезинфицирующее средство
готовое к применению.

Действующие вещества: ЧАС,
изопропиловый спирт.



АБАКТЕРИЛ

АБАКТЕРИЛ-тайм + Салфетки АБАКТЕРИЛ-тайм

Кожный антисептик.
Дезинфицирующее средство готовое
к применению.

Действующие вещества: ЧАС, ПГМГ-гх,
2-феноксиэтанол, изопропиловый спирт.

АБАКТЕРИЛ-контакт + Салфетки АБАКТЕРИЛ-контакт

Кожный бесспиртовой антисептик.
Дезинфицирующее средство готовое
к применению.

Действующие вещества: ЧАС, ПГМГ-гх,
додецилдимпропилен триамина.



АБАКТЕРИЛ

АБАКТЕРИЛ-актив

Кожный антисептик. Дезинфицирующее средство готовое к применению.

Действующие вещества: ЧАС – 0,1%, ПГМГ-гх – 0,1%, изопропиловый спирт – 64,0%.
Форма выпуска: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 5 л.
Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С
Срок годности: 5,5 лет.
Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

-  обработка рук
-  поверхности
-  медицинские изделия
-  приборы и оборудование
-  парикмахерские инструменты
-  инъекционное и операционное поле
-  сантехника
-  обувь и коврики
-  перчатки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- не требует ротации;
- не требует смывания;
- пролонгированное действие в течение 6 часов.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-актив окрашенный

Кожный антисептик для обозначения границ операционного и инъекционного полей

Действующие вещества: ЧАС – 0,1%, ПГМГ-гх – 0,1%, изопропиловый спирт – 64,0%.
Форма выпуска: 1 л. **Условия хранения:** при температуре от -40 до +40°С. **Срок годности:** 5,5 лет.

Салфетки АБАКТЕРИЛ-актив

Кожный антисептик. Дезинфицирующие салфетки готовые к применению.

Действующие вещества: ЧАС – 0,1%, ПГМГ-гх – 0,1%, изопропиловый спирт – 64,0%.
Форма выпуска: Банка №60 (136 x 170 мм), №100 (180 x 155 мм);
Ведро №200 (120 x 180 мм), Ведро 250 (15 x 20 мм);
САШЕ (135 x 175 мм) – 100 шт./уп.; САШЕ (80 x 80 мм) – 100 шт./уп.;
№120 (160 x 135 мм) – флоу-пак, сменные блоки салфеток с пропиткой.

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С
Срок годности: 5,5 лет.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

-  обработка рук
-  поверхности
-  медицинские изделия
-  приборы и оборудование
-  инъекционное и операционное поле
-  флаконы и ампулы
-  предметы ухода за больными
-  парикмахерские инструменты
-  обувь и коврики
-  перчатки
-  сантехника
-  борьба с плесенью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- готовые к применению салфетки из белого нетканого материала «Спанлейс»;
- обладают высокой прочностью и гигроскопичностью;
- не оставляют разводов и ворсинок;
- пролонгированное антимикробное действие в течение 6 часов;
- очищают, обезжиривают, дезодорируют;
- состав не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- не требует смывания с непилецевых поверхностей;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-гель

Кожный антисептик. Дезинфицирующее средство готовое к применению.

Действующие вещества: триклозан – 0,25%, 2-феноксиэтанол – 1,0%, изопропиловый спирт – 60,0%.

Форма выпуска: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 1 л, 5 л.

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С

Срок годности: 6 лет.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- инъекционное поле
- локтевые сгибы доноров
- операционное поле
- ступни ног
- обработка рук
- перчатки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- не требует ротации;
- не требует смывания;
- пролонгированное действие в течение 3 часов;
- очищающее, обезжиривающее, дезодорирующее действие;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-ИПС-75

Кожный антисептик. Дезинфицирующее средство готовое к применению.

Действующие вещества: ЧАС – 0,2%, изопропиловый спирт – 75,0%.

Форма выпуска: 100 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 5 л.

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С

Срок годности: 6 лет.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- обработка рук
- поверхности
- инъекционное и операционное поле
- приборы и оборудование
- локтевые сгибы доноров
- сантехника
- медицинские изделия
- кондиционеры
- парикмахерские инструменты
- перчатки
- предметы ухода за больными
- обувь и дезковрики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на всех объектах транспортной системы
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- не требует ротации;
- не требует смывания;
- пролонгированное действие в течение 4 часов;
- очищающее, обезжиривающее, дезодорирующее действие;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-тайм

Кожный антисептик. Дезинфицирующее средство готовое к применению.

Действующие вещества: ЧАС – 0,1%, ПГМГ-гх – 0,1%; 2-феноксиэтанол – 0,05%, изопропиловый спирт – 65,0%, тимол.

Форма выпуска: 100 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 5 л.

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С

Срок годности: 7 лет.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, зоонозных, особо опасных инфекций, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

-  обработка рук
-  поверхности
-  медицинские изделия
-  кондиционеры
-  инъекционное и операционное поле
-  приборы и оборудование
-  парикмахерские инструменты
-  перчатки
-  локтевые сгибы доноров
-  сантехника
-  предметы ухода за больными
-  обувь и дезковрики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на всех объектах транспортной системы
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- не требует ротации;
- не требует смывания;
- не содержит искусственных отдушек;
- пролонгированное действие в течение 6 часов;
- очищающее, обезжиривающее, дезодорирующее действие;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

Салфетки АБАКТЕРИЛ-тайм

Кожный антисептик. Дезинфицирующие салфетки готовые к применению.

Действующие вещества: ЧАС – 0,1%, ПГМГ-гх – 0,1%, 2-феноксиэтанол – 0,05%, изопропиловый спирт – 65,0%, тимол.

Форма выпуска: Банка №60 (120 x 180 мм), №100 (180 x 155 мм); Ведро №200 (120 x 180 мм), сменные блоки салфеток с пропиткой.

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С

Срок годности: 7 лет.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, зоонозных, особо опасных инфекций, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

-  обработка рук
-  приборы и оборудование
-  кондиционеры
-  поверхности
-  парикмахерские инструменты
-  обувь и коврики
-  медицинские изделия
-  сантехника
-  предметы ухода за больными

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + на всех объектах транспортной системы
- + в местах массового скопления людей
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- готовые к применению салфетки из белого нетканого материала «Спанлейс»;
- обладают высокой прочностью и гигроскопичностью;
- не оставляют разводов и ворсинок;
- пролонгированное антимикробное действие в течение 6 часов;
- очищают, обезжиривают, дезодорируют;
- состав не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- не требует смывания с непилецевых поверхностей;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-контакт

Кожный бесспиртовой антисептик.
Дезинфицирующее средство готовое к применению.

Действующие вещества: ЧАС – 0,3%, ПГМГ-гх – 0,12%;
додецилдипропилен триамина – 0,2%.

Форма выпуска: 100 мл, 140 мл, 500 мл, 1 л, 5 л.

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°C

Срок годности: 6 лет.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| обработка рук | медицинские изделия | кондиционеры | обувь и дезковрики |
| инъекционное и операционное поле | приборы и оборудование | парикмахерские инструменты | пропитка салфеток |
| поверхности | сантехника | скорлупа яиц | борьба с плесенью |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на всех объектах транспортной системы
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в местах массового скопления людей
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в воинских частях и соединениях

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- не содержит продуктов брожения и животного происхождения;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- пролонгированное действие в течение 5 часов;
- не требует ротации;
- не требует смывания;
- очищающее, обезжиривающее, дезодорирующее действие;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

Салфетки АБАКТЕРИЛ-контакт

Дезинфицирующие салфетки готовые к применению.
Не содержат спирта.

Действующие вещества: ЧАС – 0,3%, ПГМГ-гх – 0,12 %, додецилдипропилен триамина – 0,2%.

Форма выпуска: Банка №60 (136 x 170 мм), №100 (180 x 155 мм); №120 (160 x 135 мм) флоу-пак, сменные блоки салфеток с пропиткой.

Условия хранения: при температуре от -40 до +40°C

Срок годности: 6 лет.

Антимикробная активность: эффективно против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных, особо опасных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| обработка рук | приборы и оборудование | СИЗ |
| поверхности | парикмахерские инструменты | обувь и коврики |
| медицинские изделия | сантехника | борьба с плесенью |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + на всех объектах транспортной системы
- + в местах массового скопления людей
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в воинских частях и соединениях
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- готовые к применению салфетки из белого нетканого материала «Спанлейс»;
- обладают высокой прочностью и гигроскопичностью;
- не оставляют разводов и ворсинок;
- пролонгированное антимикробное действие в течение 5 часов;
- состав не обладает коррозионной активностью;
- обезжиривают, дезодорируют;
- эффективны против биопленок;
- не требует смывания.



abakteril.ru

ДЭЗИКС

Диспенсерная система с сухими салфетками.

Состав: ■ диспенсер (ведро или банка) с закрывающимся клапаном для извлечения салфеток;
■ отдельный блок сухих салфеток в защитной пленке;
■ наклейка формуляр.

Форма выпуска: Банка 750 мл, Ведро: 3,8 л; 5 л; 5,7 л.

Срок хранения: в сухом виде не ограничен.

Срок хранения пропитанных салфеток: в течение срока годности раствора.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

-  медицинские изделия
-  предметы ухода за больными
-  обувь и коврики
-  приборы и оборудование
-  перчатки
-  жесткая мебель
-  парикмахерские инструменты
-  сантехника
-  предметы обстановки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + на станциях и машинах скорой помощи
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в диагностических лабораториях, СКП
- + на ветеринарных объектах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ёмкости изготовлены из безопасных материалов, могут быть использованы многократно;
- блок салфеток изготовлен из белого нетканого материала «Спанлейс»;
- салфетки не оставляют ворса на поверхностях, устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств, обладают отличной впитывающей способностью;
- салфетки могут использоваться как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном виде после пропитки чистой водой или раствором дезинфицирующего средства;
- количество салфеток в блоке может варьироваться от 40 штук.



abakteril.ru

Готовые к применению средства

- АБАКТЕРИЛ-кулер + Салфетки АБАКТЕРИЛ-кулер**
Дезинфицирующее средство готовое к применению.
Действующие вещества: изопропиловый спирт.
- АБАКТЕРИЛ-спороцид + Салфетки АБАКТЕРИЛ-спороцид**
Средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации готовое к применению.
Действующие вещества: перекись водорода, НУК.
- АБАКТЕРИЛ-СТ + Салфетки АБАКТЕРИЛ-СТ**
Средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации готовое к применению.
Действующие вещества: ЧАС, глутаровый альдегид.



АБАКТЕРИЛ-кулер

Дезинфицирующее средство готовое к применению.

Действующие вещества: изопропиловый спирт – 70,0%.
Форма выпуска: 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л.
Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С
Срок годности: 6 лет.
Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных, особо опасных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| сушка каналов эндоскопов | инъекционное поле | поверхности | перчатки |
| медицинские изделия | операционное поле | парикмахерские инструменты | сантехника |
| приборы и оборудование | локтевые сгибы доноров | ампулы и флаконы | борьба с плесенью |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + на станциях и машинах скорой помощи
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + на всех объектах транспортной системы
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в диагностических лабораториях, СКП
- + на ветеринарных объектах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- соответствует требованию Фармакопейной статьи «Микробиологическая чистота» для 2 категории;
- не содержит отдушек, добавок и увлажняющих компонентов;
- очищающее, обезжиривающее, дезодорирующее действие;
- не обладает коррозионной активностью;
- не требует смывания даже с пищевых поверхностей;
- может использоваться в качестве пропиточного раствора для сухих салфеток;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- не допускается разбавление и разведение средства!



abakteril.ru

Салфетки АБАКТЕРИЛ-кулер

Дезинфицирующие салфетки готовые к применению.

Действующие вещества: изопропиловый спирт – 70,0%.
Форма выпуска: Банка №60 (120 x 180 мм), №100 (180 x 155 мм); САШЕ (135 x 175 мм) – 100 шт./уп.; сменные блоки салфеток с пропиткой.
Условия хранения: при температуре от -40 до +40°С
Срок годности: 6 лет.
Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных, особо опасных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|
| инъекционное поле | поверхности | приборы и оборудование |
| операционное поле | сантехника | парикмахерские инструменты |
| локтевые сгибы доноров | медицинские изделия | ампулы и флаконы |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + на станциях и машинах скорой помощи
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + на всех объектах транспортной системы
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + в диагностических лабораториях, СКП
- + на ветеринарных объектах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- готовые к применению салфетки из белого нетканого материала «Спанлейс»;
- обладают высокой прочностью и гигроскопичностью;
- не оставляют разводов и ворсинок;
- состав не содержит отдушек, добавок и увлажняющих компонентов;
- очищают, обезжиривают, дезодорируют;
- состав не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- не требует смывания с непищевых поверхностей.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-спороцид

Средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации, кислородосодержащее, готовое к применению.

Действующие вещества: перекись водорода – 6%, НУК – 0,2%.

Форма выпуска: 1 л, 5 л.

рН 1% раствора – 3

Условия хранения: при температуре от 0 до +35°C

Срок годности: 2 года.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных, особо опасных, анаэробных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, спор.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | |
|--|---|---|
|  медицинские изделия |  хирургические инструменты |  жесткие и гибкие эндоскопы |
|  приборы и оборудование |  стоматологические инструменты |  УЗ датчики |
|  глюкометры |  парикмахерские инструменты |  кардиоэлектроды |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + на станциях и машинах скорой помощи
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в диагностических лабораториях, СКП
- + на ветеринарных объектах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- обладает окисляющим действием;
- не портит большинство обрабатываемых объектов;
- не требует ротации;
- не оказывает фиксирующего действия на органические вещества;
- может использоваться в качестве пропиточного раствора для сухих салфеток;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

Салфетки АБАКТЕРИЛ-спороцид

Дезинфицирующие салфетки готовые к применению, для дезинфекции и ДВУ, кислородосодержащие.

Действующие вещества: перекись водорода – 6%, НУК – 0,2%.

Форма выпуска: Банка №60 (120 x 180 мм), №100 (180 x 155 мм).

рН 1% раствора – 3

Условия хранения: при температуре от 0 до +35°C

Срок годности: 2 года.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных, особо опасных, анаэробных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, спор.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | |
|--|---|
|  медицинские изделия |  парикмахерские инструменты |
|  приборы и оборудование |  УЗ датчики |
|  глюкометры |  кардиоэлектроды |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + на станциях и машинах скорой помощи
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в диагностических лабораториях, СКП
- + на ветеринарных объектах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- готовые к применению салфетки из белого нетканого материала «Спанлейс»;
- обладают высокой прочностью и гигроскопичностью;
- обладают спороцидным действием;
- не оставляют разводов и ворсинок;
- не портят обрабатываемые объекты;
- не фиксируют органические загрязнения.



abakteril.ru

АБАКТЕРИЛ-СТ

Средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации, готовое к применению.

Действующие вещества: ЧАС – 0,5%, глутаровый альдегид – 2,5%.

Форма выпуска: 500 мл, 1 л, 5 л.

pH 1% раствора – 7

Условия хранения: при температуре от 0 до +40°C

Срок годности: 3 года.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных, особо опасных, анаэробных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, спор.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:



медицинские изделия



хирургические инструменты



жесткие и гибкие эндоскопы



приборы и оборудование



стоматологические инструменты



УЗ датчики



глюкометры



парикмахерские инструменты



кардиоэлектроды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + на станциях и машинах скорой помощи
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в диагностических лабораториях, СКП
- + на ветеринарных объектах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- обладает очищающим действием;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии;
- не требует ротации;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- подходит для пропитывания сухих салфеток.



abakteril.ru

Салфетки АБАКТЕРИЛ-СТ

Дезинфицирующие салфетки готовые к применению, для дезинфекции и ДВУ.

Действующие вещества: ЧАС – 0,5%, глутаровый альдегид – 2,5%.

Форма выпуска: Банка №60 (120 x 180 мм), №100 (180 x 155 мм).

pH 1% раствора – 7

Условия хранения: при температуре от 0 до +40°C

Срок годности: 3 года.

Антимикробная активность: против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных, особо опасных, анаэробных и зоонозных инфекций, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавируса), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, спор.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:



медицинские изделия



парикмахерские инструменты



приборы и оборудование



УЗ датчики



глюкометры



кардиоэлектроды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + на станциях и машинах скорой помощи
- + в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях
- + в диагностических лабораториях, СКП
- + на ветеринарных объектах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- готовые к применению салфетки из белого нетканого материала «Спанлейс»;
- обладают высокой прочностью и гигроскопичностью;
- обладают спороцидным действием;
- не оставляют разводов и ворсинок;
- не портят обрабатываемые объекты, не вызывают коррозии;
- обладают очищающим действием.



abakteril.ru

Средства по уходу за кожей

АБАКТЕРИЛ-софт

Жидкое мыло, дезинфицирующее.
Действующие вещества: ЧАС, ПГМГ-гх.



АБАКТЕРИЛ

ДЕТСКОЕ МЫЛО «С первых дней жизни»

Жидкое мыло.
Действующие вещества: бетадин, Д-пантенол, комплекс растительных экстрактов.



КРЕМ «Медицинский»

Крем для рук.
Для ухода за кожей рук медработников с маслом ши, маслом авокадо и провитамином В5.



АБАКТЕРИЛ-софт

Жидкое мыло дезинфицирующее.

Действующие вещества: ЧАС – 1,0%, ПГМГ-гх – 0,25%.
Форма выпуска: 500 мл, 1 л, 5 л.
pH 1% раствора – 5-7
Условия хранения: при температуре от -40 до +40°C
Срок годности: 6 лет.

Антимикробная активность: обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных грибов.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- | | | |
|---|---|---|
|  руки |  сантехника |  поверхности |
|  тело |  посуда |  жесткая мебель |
|  обувь |  резиновые коврики |  предметы обстановки |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + на промышленных предприятиях различного профиля
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + в торгово-развлекательных и офисных центрах
- + в местах массового скопления людей
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- подходит для ежедневного применения;
- нейтральное значение pH;
- содержит растительные экстракты и масла;
- оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие;
- пролонгированное антимикробное действие не менее 4 часов;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.



abakteril.ru

Мыло Детское жидкое «С первых дней жизни»

Состав: вода, кокоамидопропил бетаин, кокоамфоацетат натрия, кокоглюкозид, сульфэтоксилат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, Д-пантенол, лимонная кислота, изотиазолинон, тетранатриевая соль ЭДТА, комплекс растительных экстрактов.

Форма выпуска: 500 мл, 1 л, 5 л.

Условия хранения: при температуре от -35 до +35°C

Срок годности: 2 года.

Антимикробная активность: бактерицидное, противовоспалительное, противоаллергическое и успокаивающее действие, снимает раздражение.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:



руки



посуда



игрушки



тело



поверхности



жесткая мебель



обувь



предметы обстановки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля, в т.ч. детских
- + в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры, спорта и отдыха
- + в детских учреждениях различного профиля
- + на предприятиях различного профиля
- + на предприятиях коммунально-бытового обслуживания
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + на всех объектах транспортной системы
- + в торгово-развлекательных и офисных центрах
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- защитное, увлажняющее и смягчающее действие;
- содержит натуральные масла и Д-пантенол;
- полностью соответствуют особенностям детской кожи;
- подходит для ежедневного мытья даже чувствительной кожи;
- рекомендовано для принятия душа, в качестве пены для ванн.



abakteril.ru

Крем «Медицинский»

Состав: вода, масло вазелиновое, моностеарат глицерина, цетеариловый спирт, глицерин, масло растительное, цетеарет- 20, изопропилпальмитат, циклометикон, масло ши, масло авокадо, провитамин В5, витамин Е, витамин F, трилон Б, парфюмерная композиция, пропиленгликоль (и) диазолидинил мочевины (и) иодопропинилбутилкарбамат.

Форма выпуска: 75 мл, 200 г.

Условия хранения: при температуре от 0 до +25°C

Срок годности: 24 месяца.



ОБЪЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:



руки



тело

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- + в медицинских организациях любого профиля и ЛПУ, в т.ч. детских
- + в учреждениях соцобеспечения, спорта и отдыха
- + в детских учреждениях различного профиля
- + на предприятиях общественного питания и торговли
- + в быту

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- обладает легкой текстурой;
- хорошо распределяется на коже рук;
- быстро впитывается, не оставляет жирной плёнки;
- способствует снятию раздражения и воспаления кожи рук в результате контакта с чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами;
- активно увлажняет и питает кожу;
- устраняет сухость, шелушение, придаёт коже мягкость и эластичность.



abakteril.ru

Дозаторы и держатели

ДУ-010 Санит

Объем дозирования:
1,5; 1,8; 2,2; 2,5 мл (регулируется)
Для стандартных прямоугольных флаконов объемом 1 л (высотой до 207 мм).

В комплекте:
дозатор; комплект крепежа; паспорт.

Материал:
АБС-пластик, нержавеющая сталь.

Производство:
Республика Беларусь.

МДУ-07

Объем дозирования:
1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мл (регулируется)
Для стандартных прямоугольных флаконов объемом 0,5-1 л (высотой до 210 мм). Подлежит автоклавированию при температуре 120°C. Прост и надежен в эксплуатации.

В комплекте:
дозатор; комплект крепежа; еврофлакон 1 л; паспорт.

Материал:
АБС-пластик.

Производство:
Россия.

МДУ-10

Объем дозирования:
1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мл (регулируется)
Для стандартных прямоугольных флаконов объемом 1 л. Площадка-основание для сбора стекающих капель.

Три цвета корпуса:
белый, серый, черный.

В комплекте:
дозатор; комплект крепежа; еврофлакон 1 л; паспорт.

Материал:
АБС-пластик, нержавеющая сталь.

Производство:
Россия.

Био-Эконом

Объем дозирования:
от 1,5 до 3 мл
(зависит от силы давления на рычаг).
Для стандартных прямоугольных флаконов объемом 1 л.

В комплекте:
дозатор; комплект крепежа; еврофлакон 1 л; паспорт.

Материал:
АБС-пластик, нержавеющая сталь.

Производство:
Россия.

Шульке и Майр

Объем дозирования:
от 1 до 3 мл.
Для стандартных прямоугольных флаконов объемом от 0,45 до 1 л (с горловым отверстием 28 мм).

В комплекте:
дозатор; комплект крепежа; инструкция.

Материал:
ударопрочный АБС-пластик.

Производство:
Германия.

A-259, A259-S, A259-K

Объем дозирования:
от 1 до 2 мл.
Для ПЭ флаконов объемом 1 л, оснащенными насадками «диспенсопак» или ЗМР-насосами.

В комплекте:
дозатор; комплект крепежа.

Материал:
нержавеющая сталь (A-259)
металл со спецпокрытием (A259-S и A259-K).

Производство:
Россия.



Держатель для флаконов ДНС-010

Настенный кронштейн для фиксации еврофлаконов с насосом-дозатором.

- эргономичный;
- для флакона с диаметром горловины 28 мм;
- надежно монтируется на стену с помощью крепежа;
- рекомендуется установка над раковиной, поддоном или другим приспособлением для сбора капель;
- по запросу комплектуется крепежом.

Держатель для диспенсерной системы

Предназначен для надежной вертикальной фиксации диспенсерных систем разного объема.

- высота держателя 100 мм;
- внутренний диаметр верхнего обода – 180 мм;
- фиксирующая панель 70 x 90 мм с 2 отверстиями;
- выполнен из металлической проволоки Ø 6 мм;
- поверхность окрашена порошково-полимерным напылением;
- по запросу комплектуется крепежом.

Кронштейн для канистр

Настенный кронштейн для хранения 5-литровых канистр.

- габаритный размер 200 x 155 x 70 мм;
- фиксирующая панель 120 x 90 мм с 4 отверстиями;
- выдерживает вес до 10 кг;
- выполнен из металлической проволоки Ø 6 мм;
- поверхность окрашена порошково-полимерным напылением;
- по запросу комплектуется крепежом.



abakteril.ru



abakteril.ru



abakteril.ru

Индикаторные полоски

«ДХЦ»

Предназначены для определения концентрации активного хлора в растворе.

В комплекте:

- запечатанный пенал с индикаторными полосками 100 шт.;
- цветовая шкала для сравнения;
- инструкция по применению;
- контрольные наклейки.

Срок хранения:

- в невскрытой упаковке 18 мес.
- после вскрытия 3 мес.



abakteril.ru

«ЧАС-100»

Лакмусовые индикаторные полоски для контроля смыва дезинфицирующих средств на основе четвертично-аммониевых соединений.

В комплекте:

- запечатанный пенал с индикаторными полосками 100 шт.;
- цветовая шкала для сравнения;
- инструкция по применению;
- контрольные наклейки.

Срок хранения:

- в невскрытой упаковке 18 мес.
- после вскрытия 3 мес.



abakteril.ru

«Абактерил»

Лакмусовые индикаторные полоски для визуального определения количества активного вещества в приготовленных дезрастворах.

В комплекте:

- запечатанный пенал с индикаторными полосками 100 шт.;
- цветовая шкала для сравнения;
- инструкция по применению;
- контрольные наклейки.

Срок хранения:

- в невскрытой упаковке 18 мес.
- после вскрытия 3 мес.



abakteril.ru